



«СОГЛАСОВАНО»

И.о. председателя Комитета по  
новой медицинской технике

Д. Пайзиев

«21» 02 2025г.

Н и ЭС № 5

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕЗЕРВАТИВЫ МУЖСКИЕ РЕЗИНОВЫЕ ЛАТЕКСНЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ “LIFE” №2

Супертонкие с ароматом ванили/ Точечные и ребристые с ароматом шоколада/  
Ребристые с ароматом банана/ Точечные с ароматом клубники/ Точечные с ароматом  
жасмина.

### Название продукта: LIFE

Правильное использование латексных презервативов может помочь снизить риск заражения ВИЧ (СПИДом) и другими заболеваниями, передающимися половым путем, включая гонорею и сифилис.

Презервативы «LIFE» изготовлены из натурального латекса. Прошел электронную проверку.

### Способ применения

1. Осторожно откройте боковую часть пакетика. Старайтесь не повредить презерватив ногтями или другими предметами.
2. Наденьте презерватив на головку эрегированного полового члена. Это помогает предотвратить беременность и инфекции, передающиеся половым путем.
3. Наденьте презерватив на конец полового члена так, чтобы резиновая оболочка оказалась снаружи. С помощью пепельницы нажмите на поршень презерватива и выпустите захваченный воздух, освобождая место для спермы.
4. Удерживая конец поршня другим пеплом, раскройте презерватив по всей длине полового члена.
5. Остановитесь и проверьте, чувствуете ли вы, что презерватив соскальзывает или пенис дергается. Это может привести к разрыву презерватива. Если он изнашивается в процессе использования, замените его новым.
6. Снимите презерватив, прикрепленный к основанию полового члена, с эрегированного полового члена после эякуляции. Презерватив можно снять только после удаления полового члена. Чтобы избежать нежелательного контакта со спермой, не прикасайтесь к пенису и презервативу.
7. После использования протрите презерватив бумажным полотенцем и выбросьте его в мусор. Не смывайте презерватив в унитаз.

### Меры предосторожности

1. Используйте новый презерватив при каждом половом акте или другом контакте, при котором может соприкоснуться половой член. Не используйте презерватив в следующих случаях: когда истек срок его годности, при повреждении упаковки (выберите презерватив из неповрежденной упаковки) или при наличии каких-либо дефектов.

2. Предназначен для одноразового использования. Повторное использование создает риск трения, разрыва, смещения и потери прочности, что увеличивает риск нежелательной беременности и заболеваний, передающихся половым путем.
3. Храните презерватив в сухом и прохладном месте.
4. Используйте только смазочные материалы на водной основе. Никогда не используйте массажное масло, детское масло, сливочное масло, маргарин или другие смазочные материалы на масляной основе. Все масла разрушают латексный презерватив.
5. Если во время использования презерватив порвался или обнаружена дырка, советуем обратиться за неотложной медицинской помощью, но не позднее 72 часов.

### **Предупреждение**

1. Если этот продукт используется по назначению и не помогает, прекратите его использование и обратитесь к врачу. Преждевременная эякуляция может быть связана с состояниями, требующими медицинской помощи.
2. Избегайте контакта с осенью.
3. Прекратите использование, если у вас или вашего партнера появилась сыпь или реакция, такая как зуд или отек. Если симптомы не исчезнут, обратитесь к врачу.
4. Этот продукт содержит натуральный латекс, который может вызывать аллергические реакции, включая анафилактические реакции.
5. Некоторые лекарства, используемые для секса или секса, могут повлиять на презервативы, поэтому перед их использованием проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

### **Противопоказание**

Не имеется другие противопоказание, за исключением повышенной чувствительности к ингредиентам.

### **Срока годности**

5 лет.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25° C в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте.

### **Форма выпуска**

*Первичная упаковка:* Каждый презерватив упакован в ламинированную фольгу.


*Вторичная упаковка:* 2 презерватива в картонной коробке.

*Групповые упаковки:* 72 вторичные упаковки по 2 презерватива помещены в картонную коробку;

### **Список стандартов**

Продукт соответствует требованиям ISO 4074 и спецификациям ВОЗ.

### **Производитель:**

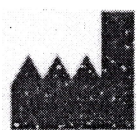

Universal Prophylactic Pvt. Ltd.


Regd. Office & Factory:

Plot No. K-117, MIDC Waluj, Aurangabad - 431136 Maharashtra, Индия.


Tele-fax +91 240-2563256 E-mail [universalcondom@gmail.com](mailto:universalcondom@gmail.com)

E-mail [universalprophylactic@gmail.com](mailto:universalprophylactic@gmail.com)


# Инструкция по применению

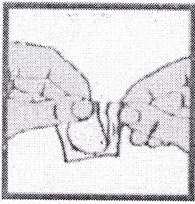

1. Осторожно оторвите упаковку из фольги, стараясь не повредить презерватив.

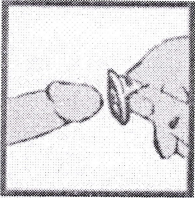

2. При извлечении из фольги избегайте повреждения презерватива ногтями, украшениями и т.п.

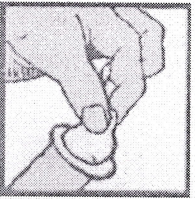


3. Аккуратно сожмите кончик презерватива между большим и указательным пальцами, чтобы выпустить воздух из кончика, одновременно надевая презерватив на головку эрегированного полового члена. Это необходимо сделать до того, как произойдет какой-либо контакт между пенисом и телом партнера, чтобы помочь предотвратить инфекции, передающиеся половым путем, и беременность.



4. Продолжая удерживать кончик презерватива, разворачивайте другой рукой презерватив по всей длине эрегированного полового члена.

5. Продолжая удерживать кончик презерватива, разворачивайте другой рукой презерватив по всей длине эрегированного полового члена.

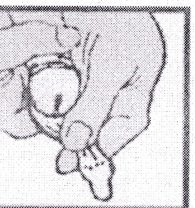

6. После эякуляции, удерживая край презерватива и медленно извлеките пенис, пока он все еще находится в эрегированном состоянии так, чтобы презерватив не соскользнул.

7. Снимите презерватив с полового члена, медленно сдвинув его.

Важно не допускать, чтобы пенис или использованный презерватив касались области влагалища после окончания полового акта.



8. Заверните использованный презерватив и выбросьте его в закрытую мусорную корзину.

|  |                                           |  |                            |  |                                             |
|--|-------------------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------------|
|  | Хранить в прохладном сухом месте          |  | Беречь от солнечного света |  | Использовать до                             |
|  | Содержит натуральный каучуковый латекс.   |  | Производитель              |  | Ознакомьтесь с инструкцией по использованию |
|  | Не используйте, если упаковка повреждена. |  | Не использовать повторно   |  | Номер партии                                |
|  | Европейский уполномоченный представитель  |  | Импортер                   |  | Медицинское изделие                         |
|  | Уникальный идентификатор устройства       |  |                            |  |                                             |